


1 灰色のキャップを取り外す

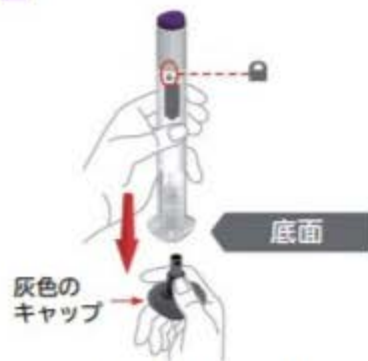

緑色の目印  がロック  の位置にあることを確認してください。

透明な底面を皮膚にあて注射の準備ができるまではロックを解除しないでください。

灰色のキャップをまっすぐ引っ張って外し、捨ててください。

一度取り外したキャップは付け直さないでください。針を破損させる原因になります。

針には触れないでください。

2 底面を皮膚にあて、ロックを解除する



透明な底面を注射場所の皮膚に密着させてください。

注入器の中央部分を強くつままないでください。針が戻らなくなるおそれがあります。



緑色の目印  をロック解除  の方向に止まるまで回してください。

3 注入ボタンを押し、そのまま待つ (長くて10秒)



紫色の注入ボタンを押し、そのまま待ちます。以下の音を聞いてください。

- 1回目のカチッという音で注射が開始します。
- 2回目のカチッという音で注射完了です。

注入器の廃棄方法

- 使用済みの注入器は、主治医の指示に従って廃棄してください。



注入器の透明な部分に灰色のゴムピストンが見えていれば、注射は完了しています。

注射後は、針に注意して使用済みの注入器を廃棄してください。